

FM補聴システム

フェイス トーカー
Face Talker®

会議・研修 ホールイベント

音響機器からのライン出力を送信機へ入力して
受信機のイヤホンへFM無線を使って伝えます



耳で
良く聞こえます

受信音をミュート出来ます

受信機は
複数台使えます

ピンマイク等の
音源を
送っています

送信音をミュート出来ます



打ち合わせ・面接

話し手の声がはっきり聞こえます
また
受信機のイヤホンマイクで
自分の声も聞こえますので
話し易くなっています

日常業務の
打ち合わせ
面接に
役立ちます



音声-文章変換と併用

受信機はスマートフォン
と繋がりますので
音声-文章変換アプリで
声の伝達と同時に文字化できます

声と、その文章化を
併用することで
健聴者は
「自然に話すこと」
で、より多くの
難聴者とコミュニケーションできます



Face Talker 送信機・受信機

難聴者への機会均等、合理的配慮を実現できる方法の1つで、
健聴者の「自然に話すこと」が 難聴者のサポートとなります



FM受信機
GT-R8B



FM無線

(特定小電力800MHz B帯)



ピンマイク又は
音響設備からの
音声出力

FM送信機
GT-T8B

※受信機の台数は
エリア内無制限です

重量 90g サイズ 67x92x21mm 電池持続時間 10時間 (eneloop pro 使用時)

その他の使い方


離れた場所



受信機 GT-R8B

口元で集音してたを送るので、はっきり聞こえます

言葉を葉っぱに例えると
補聴が無い状態では ≡ 「虫食い」が
補聴をすると、はっきりします

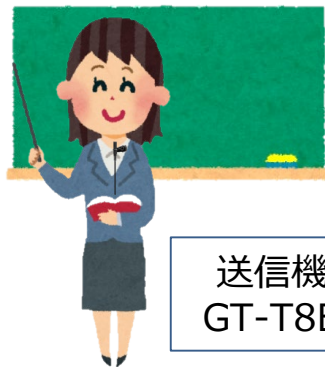

送信機
GT-T8B

こんな使い方ができます

講演・朝礼など



学校の講義、職場の朝礼など
離れた人の声を聞く時に役立ちます

集団補聴システム



音響装置と送信機を接続して、
複数の受信機に無線で送ります。

小グループで



家族や友人と
テーブルを
囲んでの
食事、団らん
旅行
などで
役立ちます

TVの音を飛ばす



TVのイヤホン端子と
送信機の外部マイク端子を
付属のケーブルで繋がります

スマートフォンと繋ぐ



スマートフォンと
繋ぐ端子があります
受信機から音声をスマートフォンに送り
音声-文章変換などのアプリで使えます
取材素材の文字起こしも便利です



FMシステムの注意点

FMシステムは、電波の届く範囲ではどこでも受信できるため、機密性はありません。大切な情報や著作権などの取り扱いにはご注意ください

電波はあらゆるところから飛び込んでくるため、混信や干渉などが起こる可能性があります。あらかじめお含みおください

●お問い合わせは・ご用命は



アシストホーン株式会社

横浜市緑区中山1-6-17-403号 〒226-0019
TEL:045-532-9733 / FAX:045-532-9753
Mail: info@assistphone.co.jp

製造元

ジャンパーズ
Jumpers株式会社